


ASTOPAD™ ROE

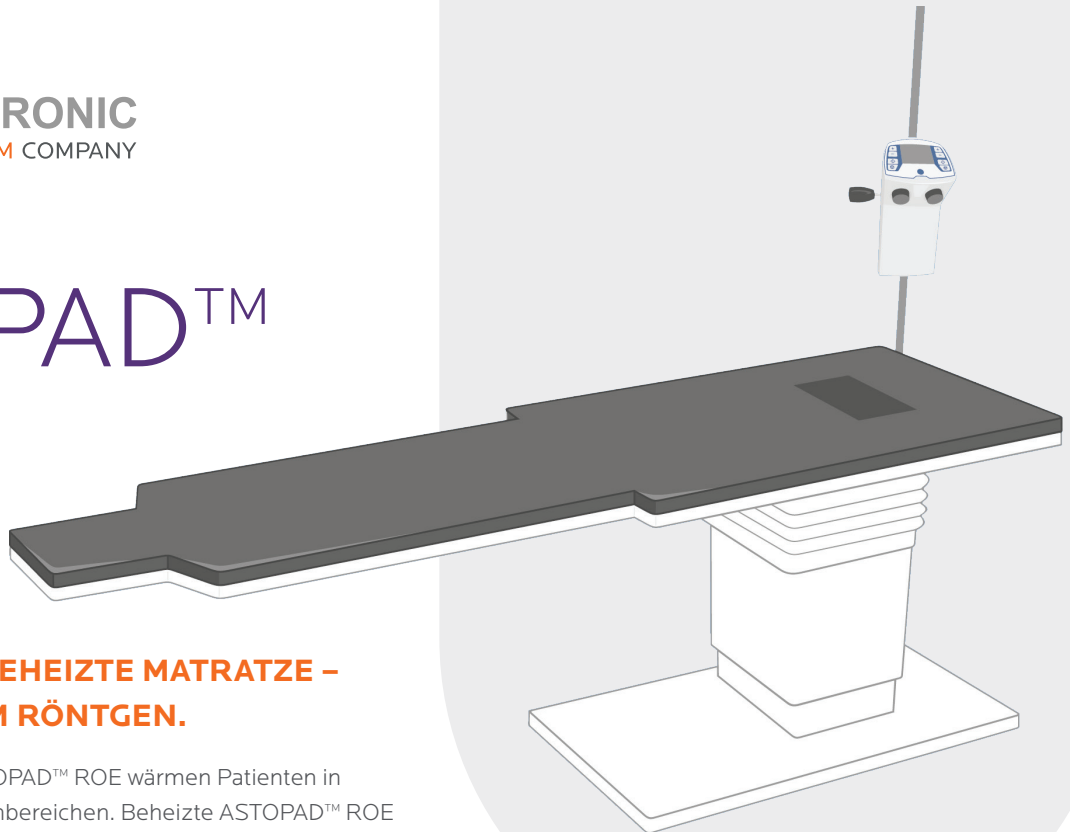

DIE EINZIGARTIGE BEHEIZTE MATRATZE – ARTEFAKTFREI BEIM RÖNTGEN.

Die Anwendungsteile von ASTOPAD™ ROE wärmen Patienten in artefaktempfindlichen Röntgenbereichen. Beheizte ASTOPAD™ ROE Matratzen sind für eine 100%ig artefaktfreie Patientenpositionierung bei Röntgenanwendungen in Herzkatheter-Laboren, der Angiographie oder anderen hybriden OP-Bereichen ausgelegt. Eine einzigartige Sensorzone außerhalb des Patientenlagerungsbereichs regelt die Temperatur der ASTOPAD™ ROE bei gleichzeitiger Wahrung der Patientensicherheit. Viskoelastischer Schaumstoff bildet kombiniert mit dem überlegenen Karbonfaser-Heizelement die perfekte und für alle Routine- und Noteingriffe geeignete OP-Tischmatratze, die den Patienten mit Wärme und ultimativem Komfort versorgt. ASTOPAD™ ist in einer Dicke von 4 cm und 8 cm als ROE4 und ROE8 erhältlich. Die beheizten Matratzen sind maßgeschneidert, sodass sie perfekt zu den meisten gängigen OP-Tischen passen. ASTOPAD™ ROE 4 und ROE 8 werden vom Steuergerät ASTOPAD™ DUO310 geregelt, das entweder am Infusionsständer oder direkt an einer medizinischen Schiene montiert werden kann.

PATIENTENERWÄRMUNG IM SINNE DER NACHHALTIGKEIT.



ASTOPAD™ benötigt für seinen Betrieb kein Einwegmaterial und kann mit krankenhausblichen Desinfektionsmitteln abgewischt werden.

MERKMALE & VORTEILE



Sichere und zuverlässige Konstruktion mit Sensorzone.



Das ASTOPAD™-System kann zusammen mit HF-Chirurgiegeräten verwendet werden.




Es sind verschiedene Größen für alle marktrelevanten OP-Tische erhältlich.



Geräuschloser Betrieb für möglichst wenig Ablenkung im OP.

Auf Patientensicherheit ausgelegt

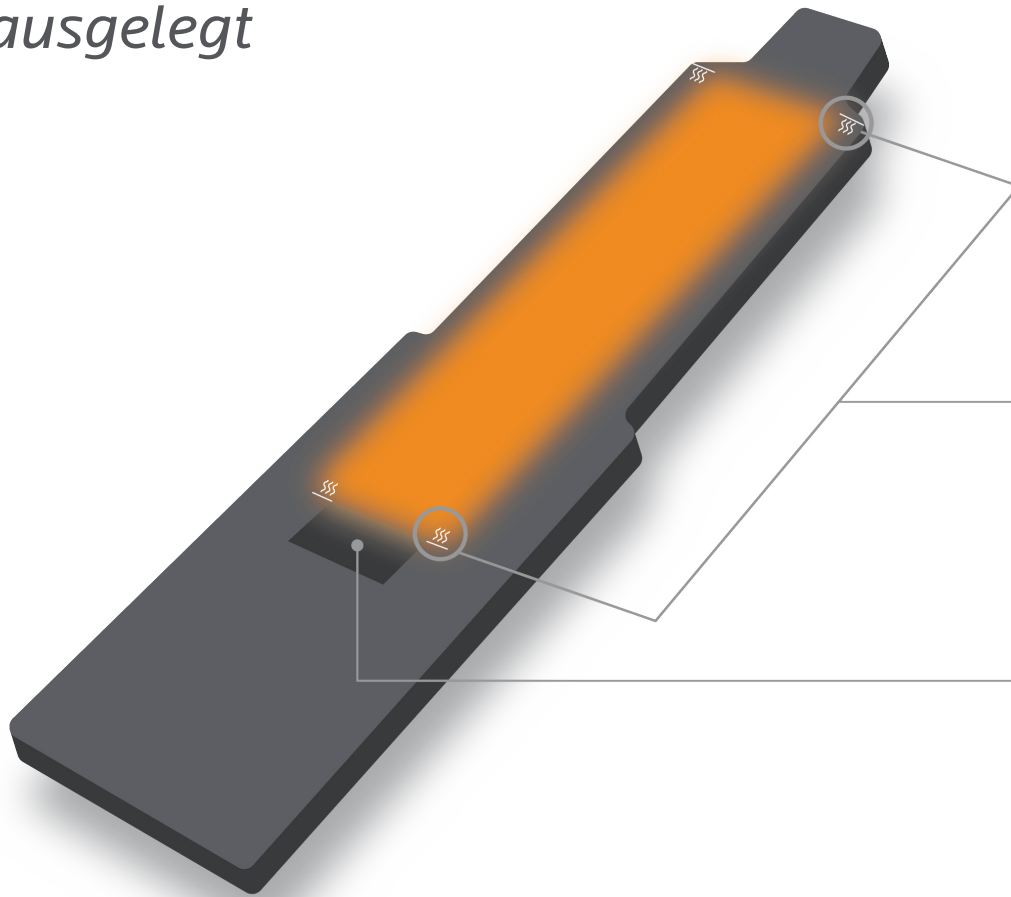

1 PATIENTENZONE:

- Dekubitusprophylaxe
- Sorgt für Wärme
- Röntgentransparent und artefaktfrei

2 SENSORZONE:

Reguliert die Temperatur der Matratze durch Nachbildung des Patienten für höchste Genauigkeit und Sicherheit.

BESTELLANGABEN:

KAT.-NR.	BESCHREIBUNG	SPANNUNG / MENGE
WIDERSTANDSWÄRMEGERÄT		
DUO310	Steuergerät	100 V – 240 V, 50 – 60 Hz
WIDERSTANDSHEIZMATRATZE		
ROE4	Beheizte ASTOPAD™ Matratze – Dicke 40 mm kundenspezifische Länge 2200 – 3000 mm	pro Stück
ROE8	Beheizte ASTOPAD™ Matratze – Dicke 80 mm kundenspezifische Länge 2200 – 3000 mm	pro Stück

