


ASTOPAD™ SOF

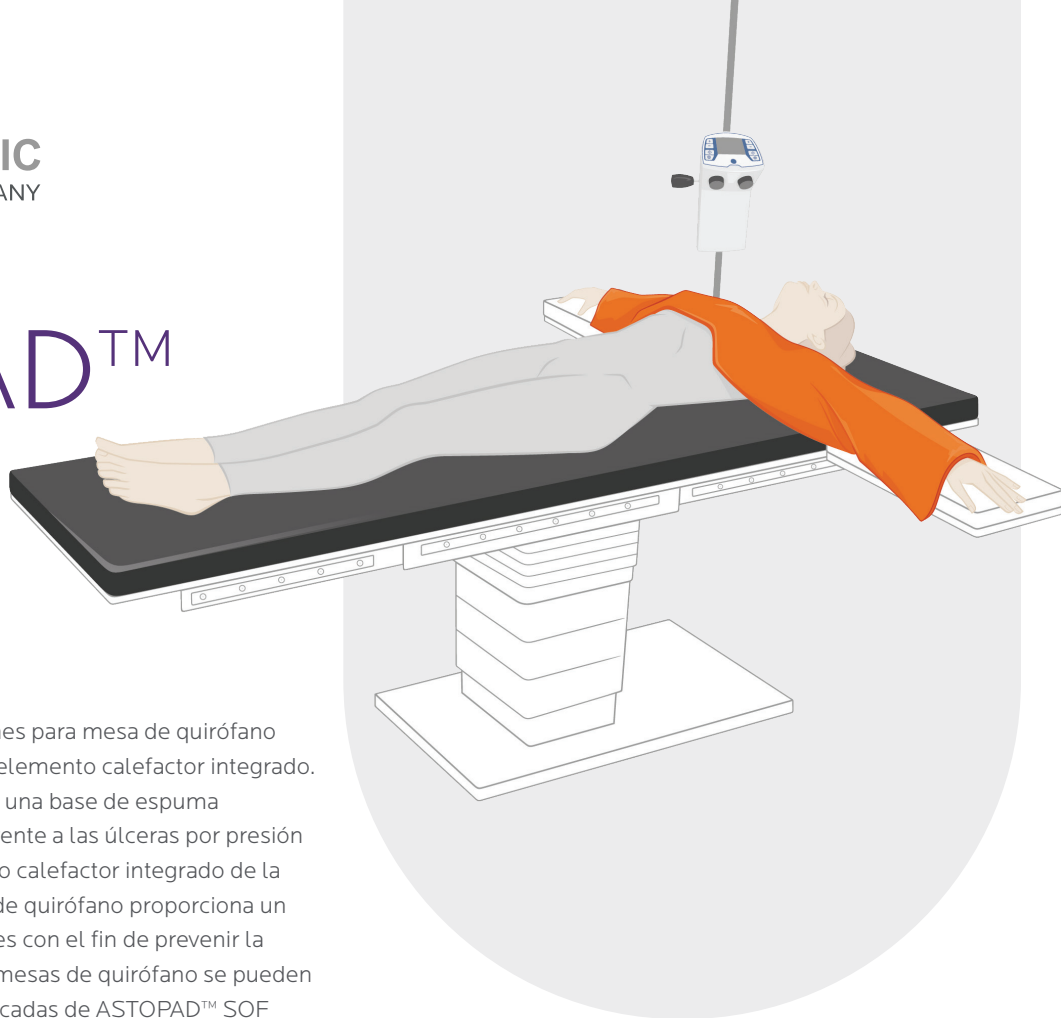

COJÍN TÉRMICO

ASTOPAD™ SOF son los exclusivos cojines para mesa de quirófano hechos de espuma viscoelástica con un elemento calefactor integrado. La espuma viscoelástica se combina con una base de espuma dinámica para una excelente profilaxis frente a las úlceras por presión sobre la mesa del quirófano. El elemento calefactor integrado de la parte superior de los cojines para mesa de quirófano proporciona un calentamiento perfecto para los pacientes con el fin de prevenir la hipotermia. En el caso ideal, las nuevas mesas de quirófano se pueden equipar directamente con las piezas aplicadas de ASTOPAD™ SOF para la almohadilla de respaldo o bien sobre la superficie completa de la mesa de operación. Las piezas aplicadas de ASTOPAD™ SOF se fabrican individualmente conforme a las necesidades del cliente para que se adapten perfectamente a las especificaciones de tamaño de las mesas de quirófano.

CALENTAMIENTO DE PACIENTES CON SOSTENIBILIDAD.



ASTOPAD™ no requiere material desechable durante su uso y puede limpiarse con desinfectante aprobado para uso hospitalario.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS



Diseño seguro y fiable con 8 sensores de temperatura.



El sistema ASTOPAD™ puede utilizarse junto con instrumentos quirúrgicos de alta frecuencia.



Disponible en diferentes tamaños que se adaptan a todas las mesas de quirófano relevantes del mercado.



Funcionamiento silencioso para minimizar las distracciones en el quirófano.



Hecho a medida para adaptarse a todas las mesas de quirófano relevantes del mercado.



La mejor profilaxis posible frente a las úlceras por presión con una altura de la espuma de hasta 10 cm.




Disponible en forma de cojín de respaldo o de colchón para la mesa completa.



Posibilidad de uso modular junto con COV.

Diseñado para garantizar la seguridad del paciente

Technology to the next degree™

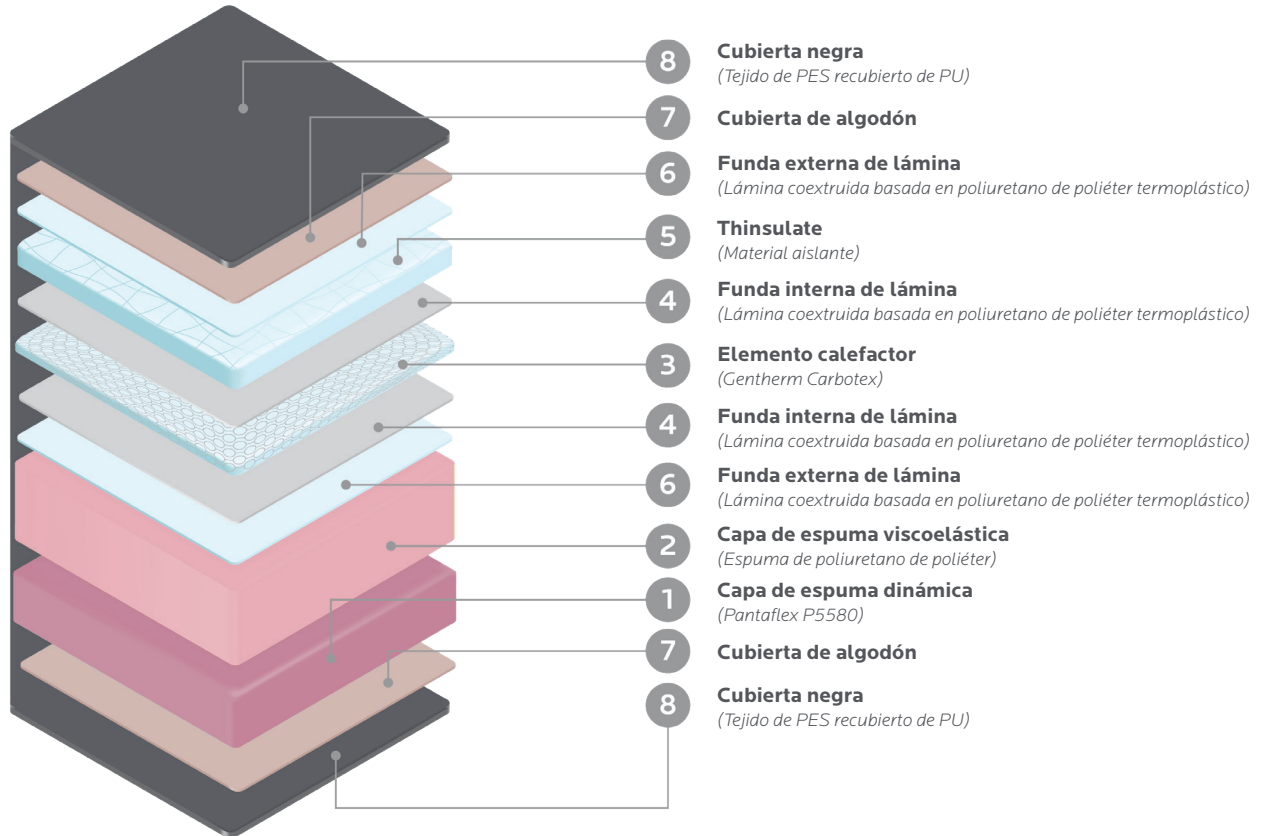

INFORMACIÓN DE PEDIDOS:

N.º CAT.	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN/CANTIDAD
COJINES TÉRMICOS RESISTIVOS		
SOF7	Cojín térmico ASTOPAD™ (600-800 mm x 450-600 mm x 40-100 mm) *	Cada uno
SOF4	Cojín térmico ASTOPAD™ (810-1300 mm x 480-600 mm x 40-100 mm) *	Cada uno
SOF5	Cojín térmico ASTOPAD™ (1310-1700mm x 480-600 mm x 40-100 mm) * <i>* Respaldo calefactado que alivia la presión para mesas de quirófano, antiestático. Las dimensiones se adaptan individualmente, de forma que es adecuado para todas las mesas de quirófano. Todos los respaldos están disponibles opcionalmente con descarga para la zona sacra.</i>	Cada uno
SOF2	Cojín térmico ASTOPAD™ (1710-2300 mm x 480-600 mm x 40-100 mm) ** <i>** Colchón calefactado que alivia la presión para mesas de quirófano, antiestático. Las dimensiones se adaptan individualmente a la mesa de quirófano.</i>	Cada uno
DUO310	Unidad de control	100 V - 240 V, 50-60 Hz

