


ASTOFLO[®] PLUS eco

Blut- und Infusionswärmer

ASTOFLO PLUS ECO ist das universelle Wärmergerät für alle Infusionen und Blutprodukte für den OP, im Intensivbereich und für alle anderen medizinischen Abteilungen.

Im elektrisch beheizten Wärmeprofil werden alle medizinischen Flüssigkeiten - ohne spezielles Einwegteil - im Serieninfusionsbesteck erwärmt und bis zur Patientenkanüle warm gehalten.

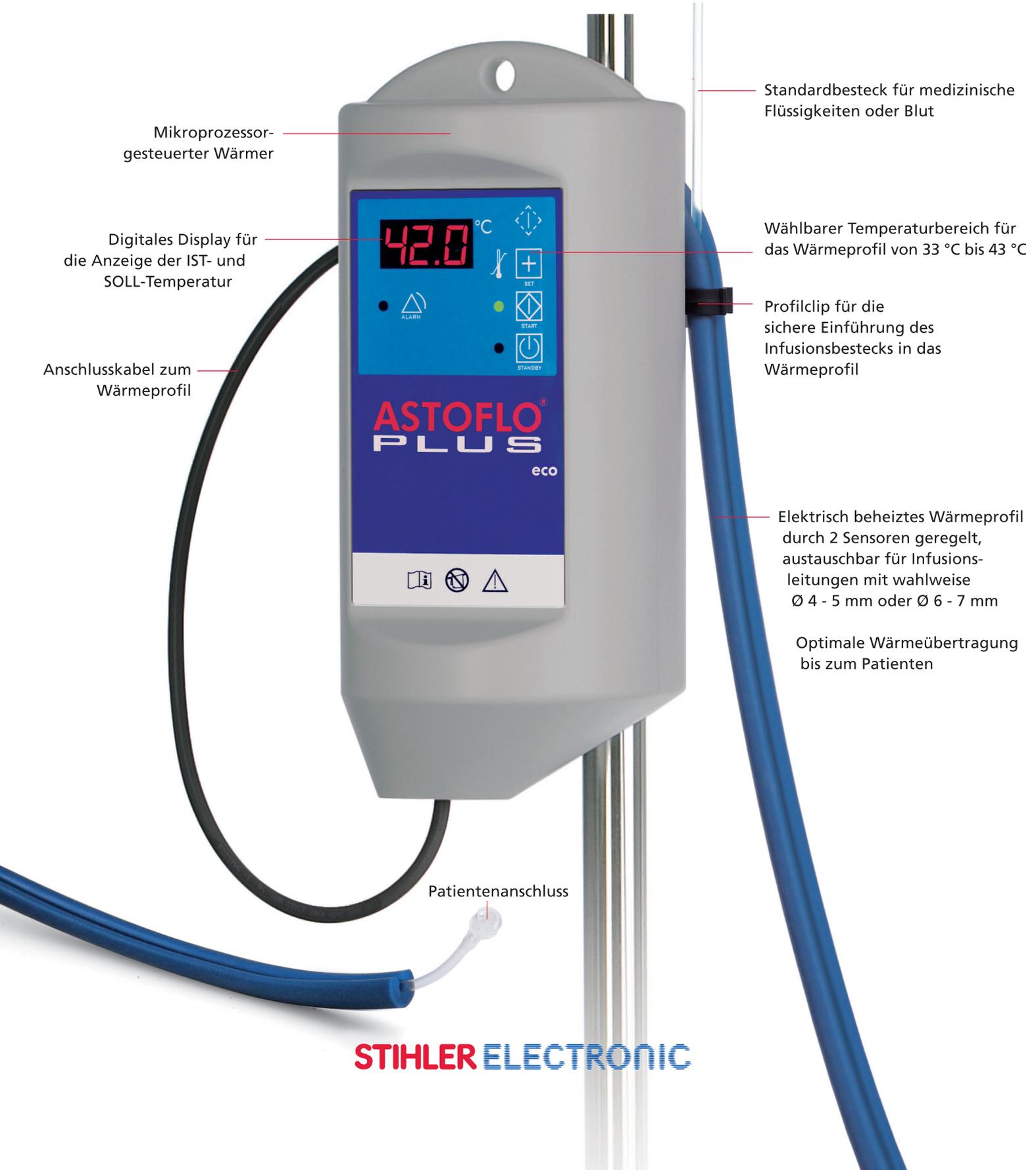

Mikroprozessor-gesteuerter Wärmer

Digitales Display für die Anzeige der IST- und SOLL-Temperatur

Anschlusskabel zum Wärmeprofil

Patientenanschluss

Standardbesteck für medizinische Flüssigkeiten oder Blut

Wählbarer Temperaturbereich für das Wärmeprofil von 33 °C bis 43 °C

Profilclip für die sichere Einführung des Infusionsbestecks in das Wärmeprofil

Elektrisch beheiztes Wärmeprofil durch 2 Sensoren geregelt, austauschbar für Infusionsleitungen mit wahlweise Ø 4 - 5 mm oder Ø 6 - 7 mm

Optimale Wärmeübertragung bis zum Patienten

STIHLER ELECTRONIC

ASTOFLO[®] PLUS eco


Blut- und Infusionswärmer

Die einfachste und wirtschaftlichste Art, alle Infusionen und Transfusionen effektiv zu erwärmen!

- Das elektrisch beheizte Wärmeprofil mit integrierten Temperatursensoren garantiert beste Erwärmung und höchste Sicherheit durch flowabhängige Regelung.
- Auf dem Weg zum Patienten wird die Flüssigkeit im Trocken-Durchlaufverfahren aktiv bis hin zur Patientenkanüle erwärmt. Vorgewärmte Lösungen werden so auch bei großem Flow bis zum Patienten warm gehalten.
- Für die unterschiedlichen medizinischen Anforderungen sind zwei verschiedene Wärmeprofile erhältlich.
- Profil WP31 / WP32
 - Für alle Standardinfusions- und Blutbestecke mit ca. 4 mm Außendurchmesser, im OP, auf Intensiv- und Normalstation.
 - In der Dialyse und bei der Hämofiltration zur Erwärmung der Blutrückflussleitung.
 - Profil WP31 / WP32 ist in den Längen 180 cm und 240 cm erhältlich.
- Profil WP33 / WP34
 - Für alle medizinischen Anwendungen wie Profil WP31 / WP32, bei denen Bestecke mit ca. 6 - 7 mm Außendurchmesser verwendet werden.
 - Profil WP33 / WP34 ist in den Längen 180 cm und 240 cm erhältlich.
- Bestellangaben
 - ASTOFLO PLUS ECO Wärmer
 - Best.-Nr.: AFP300 - Anschlusskabel zum Wärmeprofil 40 cm
 - Best.-Nr.: AFP302 - Anschlusskabel zum Wärmeprofil 80 cm

Betriebsnotwendiges Zubehör: 1 wechselbares Profil

- Profil WP31 / WP32 (blau) für Serienbestecke mit 4 - 5 mm Außendurchmesser
Länge 180 cm Best.-Nr.: WP31
Länge 240 cm Best.-Nr.: WP32
- Profil WP33 / WP34 (grau) für Bestecke mit 6 - 7 mm Außendurchmesser
Länge 180 cm Best.-Nr.: WP33
Länge 240 cm Best.-Nr.: WP34

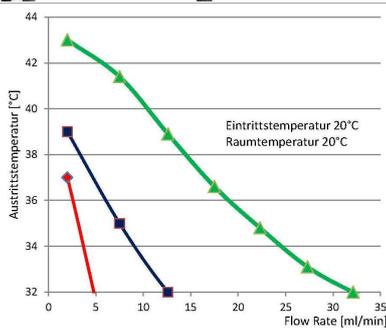

*(Prospekt Barkey 2015); ***(S-Line Barkey GA Rev.1)

Ihre zuständige Vertretung

CLASSIFIED
UL US
MEDICAL ELECTRICAL
EQUIPMENT
UL 60601-1 AND
CAN/CSA C22.2 601.1
75JA



STIHLER ELECTRONIC

Stihler Electronic GmbH
Julius-Hoelder-Strasse 36 · 70597 Stuttgart · Germany
Telefon +49 (0) 711-720670 · Telefax +49 (0) 711-7206757
www.stihlerelectronic.de · E-Mail: info@stihlerelectronic.de