


ASTOFLO[®] PLUS eco

Blod- og infusionsvarmer

ASTOFLO PLUS ECO er det universelle varmeapparat til alle infusioner og blodprodukter til operationsstuen, i intensivområdet og til alle andre medicinske afdelinger.

I den elektrisk opvarmede varmeprofil opvarmes alle medicinske væsker - uden en særlig engangsdel - i serieinfusionssættet og holdes varme frem til patientkanylen.

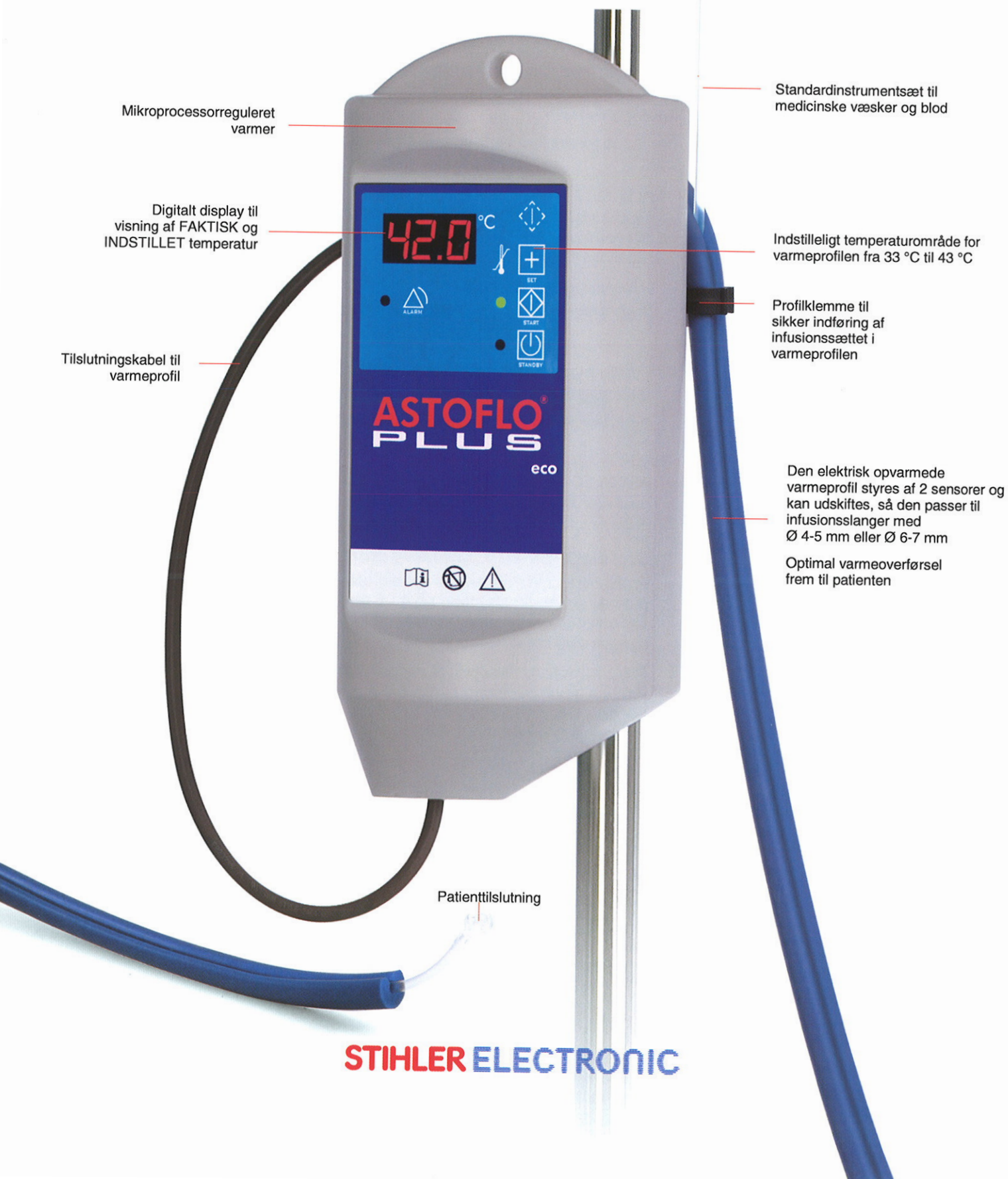

ASTOFLO® PLUS eco

Blod- og infusionsvarmer


Den nemmeste og mest økonomiske metode til at opvarme alle infusioner og transfusioner effektivt!

- Den elektrisk opvarmede varmeprofil med integrerede temperatur sensorer garanterer den bedste opvarmning og den højeste sikkerhed via strømningsafhængig regulering.
- Væsken bliver på vej til patienten aktivt opvarmet i torgennemløbs processen frem til patientkanylen. Forvarmede opløsninger holdes således varme selv ved kraftig strømning frem til patienten.
- Der fås to forskellige varmeprofiler, som opfylder de forskellige medicinske krav.
- Profil WP31 / WP32
 - Til alle standardinfusions- og blodinstrumentsæt med en udvendig diameter på ca. 4 mm, til operationsstue, intensivafdelinger og normale afdelinger.
 - I dialyse og ved hæmofiltrering, til opvarmning af blodtilbageførsledning.
 - Profil WP31 / WP32 fås i længderne 180 cm og 240 cm.
- Profil WP33 / WP34
 - Til alle medicinske anvendelser som profil WP31 / WP32, hvor instrumentsæt med en udvendig diameter på ca. 6 - 7 mm anvendes.
 - Profil WP33 / WP34 fås i længderne 180 cm og 240 cm.
- Bestillingsoplysninger
ASTOFLO PLUS ECO varmer
best.-nr.: AFP300 - Tilslutningskabel til varmeprofil 40 cm
best.-nr.: AFT302 - Tilslutningskabel til varmeprofil 80 cm

Nødvendigt tilbehør: 1 udskiftelig profil

- Profil WP31 / WP32 (blå) til serieinfusionssæt med en udvendig diameter på 4 - 5 mm
længde 180 cm best.nr.: WP31
længde 240 cm best.nr.: WP32
- Profil WP33 / WP34 (grå) til serieinfusionssæt med en udvendig diameter på 6-7 mm
længde 180 cm best.nr.: WP33
længde 240 cm best.nr.: WP34

Deres ansvarlige agentur

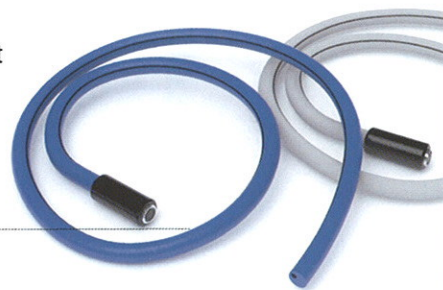

CLASSIFIED
UL US
MEDICAL ELECTRICAL
EQUIPMENT
UL 60601-1 AND
CAN/CSA C22.2 601.1
75JA



STIHLER ELECTRONIC

Stihler Electronic GmbH
Julius-Hoelder-Strasse 36 · 70597 Stuttgart · Germany
Telefon +49 (0) 711-720670 · Telefax +49 (0) 711-7206757
www.stihlerelectronic.de · E-Mail: info@stihlerelectronic.de