


ASTOFLO® PLUS eco

Veren- ja infuusionesteenlämmitin

ASTOFLO PLUS ECO on kaikkien infuusionesteiden ja verivalmisteiden lämmittämiseen soveltuva yleislämmitin, joka sopii käytettäväksi leikkaussalissa, teho-osastolla ja muilla hoito-osastoilla.

Sähkölämmitteisen lämpöprofiilin avulla kaikenlaiset infuusionesteet voi lämmittää standardiletkustossa. Nesteet pysyvät lämpiminä aina potilaan suonikanyyliin saakka. Järjestelmässä ei tarvita kertakäyttöisiä.

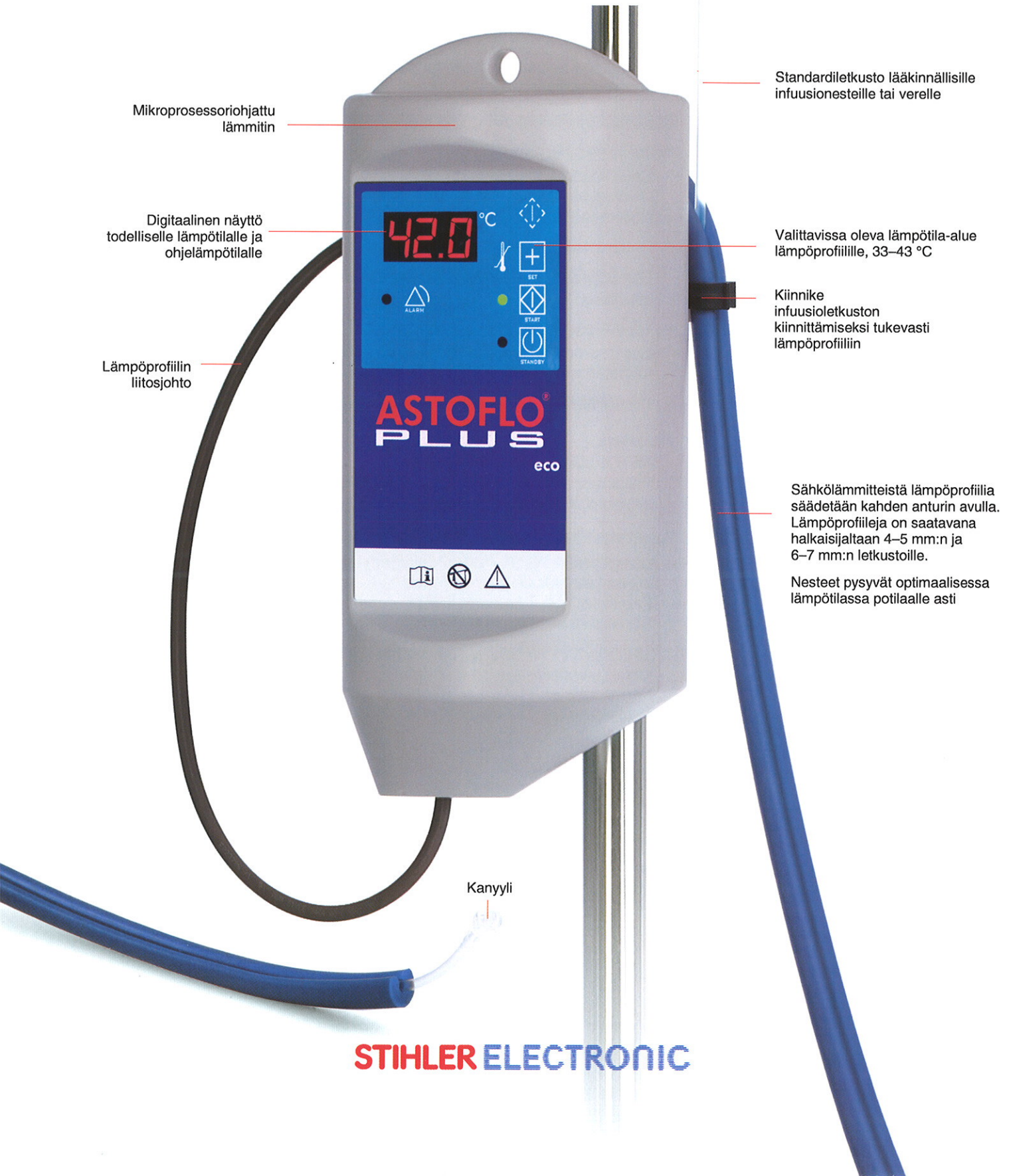

ASTOFLO® PLUS eco

Veren- ja infuusionesteenlämmitin


Yksinkertainen ja taloudellinen laite kaikkien infuusionesteiden ja siirtoveren tehokkaaseen lämmitykseen!

- Sähkölämmitteisen lämpöprofiilin sisäänrakennetut lämpötila-anturit säätävät lämpötilan infuusionopeuden mukaan luotettavasti ja turvallisesti.
- Ulkoinen lämmityselementti lämmittää letkussa virtaavaa nestettä koko matkalta aina potilaan suonikanyyliin saakka. Esilämmitetyt nesteet pysyvät näin lämpiminä suurellakin infuusionopeudella.
- Eri käyttötarkoituksia varten on saatavana kaksi erilaista lämpöprofiilia.
- Profiili WP31 / WP32
 - Sopii kaikkiin standardi-infuusio- ja verensiirtoletkustoihin, joiden ulkohalkaisija on n. 4 mm, leikkaussalissa, teho-osastoilla ja muilla hoito-osastoilla.
 - Dialyysissä ja hemofiltraatiossa takaisin virtaavan veren lämmitykseen.
 - Lämpöprofiili WP31 / WP32 on saatavana 180 cm:n ja 240 cm:n pituisena.
- Profiili WP33 / WP34
 - Sopii samoihin käyttötarkoituksiin kuin lämpöprofiili WP31 / WP32, kun käytetään ulkohalkaisijaltaan n. 6–7 mm:n letkustoja.
 - Profiili WP33 / WP34 on saatavana 180 cm:n ja 240 cm:n pituisena.
- Tilaustiedot
ASTOFLO PLUS ECO -lämmitin
Tilausno: AFP300 - Lämpöprofiilin liitosjohto 40 cm
tilausno: AFT302 - Lämpöprofiilin liitosjohto 80 cm

Tarvittavat lisävarusteet: 1 vaihdettava lämpöprofiili

- Lämpöprofiili WP31 / WP32 (sininen) letkustoille, joiden ulkohalkaisija on 4–5 mm
Pituus 180 cm Tilausno: WP31
Pituus 240 cm Tilausno: WP32
- Lämpöprofiili WP33 / WP34 (harmaa) letkustoille, joiden ulkohalkaisija on 6–7 mm
Pituus 180 cm Tilausno: WP33
Pituus 240 cm Tilausno: WP34

Jälleenmyyjä

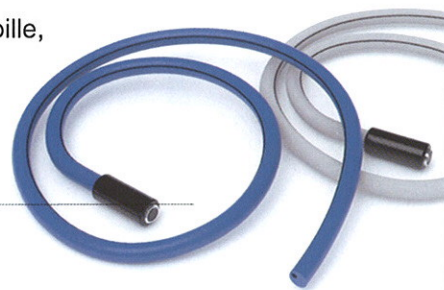

CLASSIFIED
c UL US
MEDICAL ELECTRICAL
EQUIPMENT
UL 60601-1 AND
CAN/CSA C22.2 601.1
75JA



STIHLER ELECTRONIC

Stihler Electronic GmbH

Julius-Hoelder-Strasse 36 · 70597 Stuttgart · Germany
Telefon +49 (0) 711-720670 · Telefax +49 (0) 711-7206757
www.stihlerelectronic.de · E-Mail: info@stihlerelectronic.de