


# ASTOFLO® PLUS eco

## Réchauffeur de sang et de perfusions

ASTOFLO PLUS ECO est l'appareil de réchauffement universel de toutes les perfusions et de tous les produits sanguins en salle d'opération, aux urgences et dans tous les autres services.

Le profilé chauffant électrique permet de chauffer tous les fluides médicaux – sans consommable – et d'en maintenir la température jusqu'aux canules des patients.

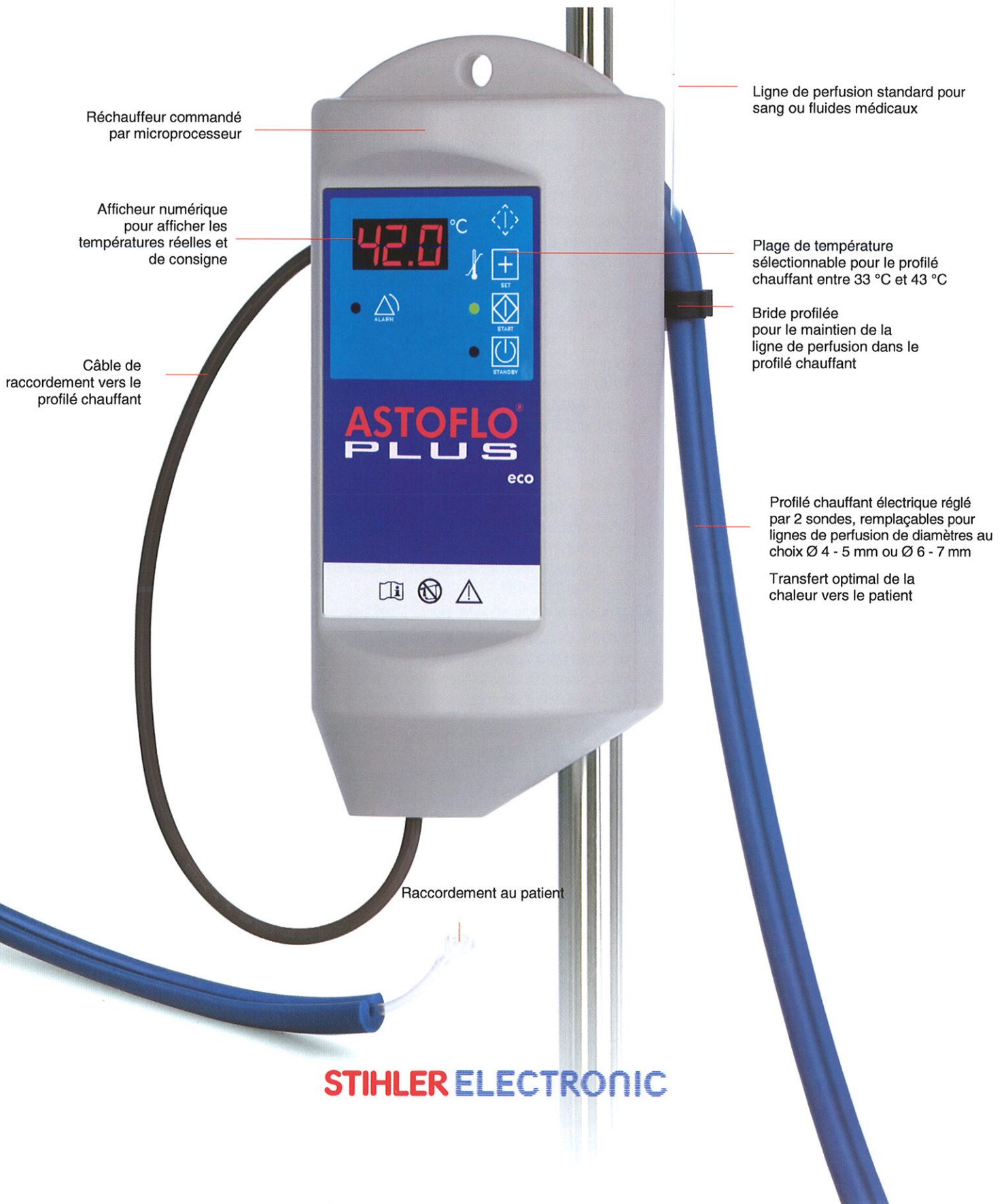

STIHLER ELECTRONIC

# ASTOFLO® PLUS eco


## Réchauffeur de sang et de perfusions

La manière la plus simple et économique  
pour chauffer toutes les perfusions et transfusions de façon efficace !

- Le profilé chauffant électrique avec sondes de température intégrées garantit le meilleur chauffage et la plus haute sécurité grâce à la régulation en fonction du débit.
- Le fluide est chauffé jusqu'au patient de façon active et de manière sèche, sans contact jusqu'à la canule du patient. Les solutions préchauffées sont également maintenues chaudes dans le cas de grands débits menés au patient.
- Pour les exigences médicales différentes, deux profilés chauffants sont disponibles.
- Profilé WP31 / WP32
  - Pour toutes les lignes standard pour perfusions et sang de diamètre extérieur d'env. 4 mm, en salle d'opération, aux urgences et autres services.
  - Pour la dialyse et l'hémodialyse, pour chauffer la conduite de retour du sang.
  - Le profilé WP31 / WP32 existe en longueurs 180 cm et 240 cm.
- Profilé WP33 / WP34
  - Pour toutes les applications médicales du profilé WP31 / WP32, pour lesquelles les lignes de diamètre extérieur d'env. 6 - 7 mm sont utilisées.
  - Le profilé WP33 / WP34 existe en longueurs 180 cm et 240 cm.
- Données de commande  
Réchauffeur ASTOFLO PLUS ECO  
N° de commande : AFP300 - Câble de raccordement vers le profilé chauffant 40 cm  
N° de commande : AFT302 - Câble de raccordement vers le profilé chauffant 80 cm

### Accessoire nécessaire pour l'utilisation : 1 profilé remplaçable

- Profilé WP31 / WP32 (bleu) pour lignes de diamètre extérieur 4 - 5 mm  
Longueur 180 cm N° de commande : WP31  
Longueur 240 cm N° de commande : WP32
- Profilé WP33 / WP34 (gris) pour prises de diamètre extérieur 6 - 7 mm  
Longueur 180 cm N° de commande : WP33  
Longueur 240 cm N° de commande : WP34

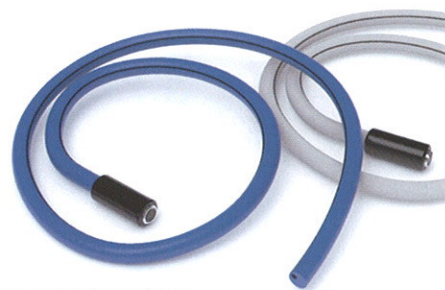

Votre distributeur

CLASSIFIED  
UL US  
MEDICAL ELECTRICAL  
EQUIPMENT  
UL 60601-1 AND  
CAN/CSA C22.2 601.1  
75JA



## STIHLER ELECTRONIC

Stihler Electronic GmbH  
Julius-Hoelder-Strasse 36 · 70597 Stuttgart · Germany  
Telefon +49 (0) 711-720670 · Telefax +49 (0) 711-7206757  
www.stihlerelectronic.de · E-Mail: info@stihlerelectronic.de