


ASTOFLO[®] PLUS eco

Bloed- en infuusverwarmer

ASTOFLO PLUS ECO is de universele bloedproducten- en infuusverwarmer, geschikt voor operatiekamer, intensive care en alle overige medische afdelingen.

In het elektrisch verwarmde warmteprofiel worden alle medische vloeistoffen – zonder extra benodigde disposables – verwarmd in standaardinfuusinstrumenten en warm gehouden tot aan de canule bij de patiënt.

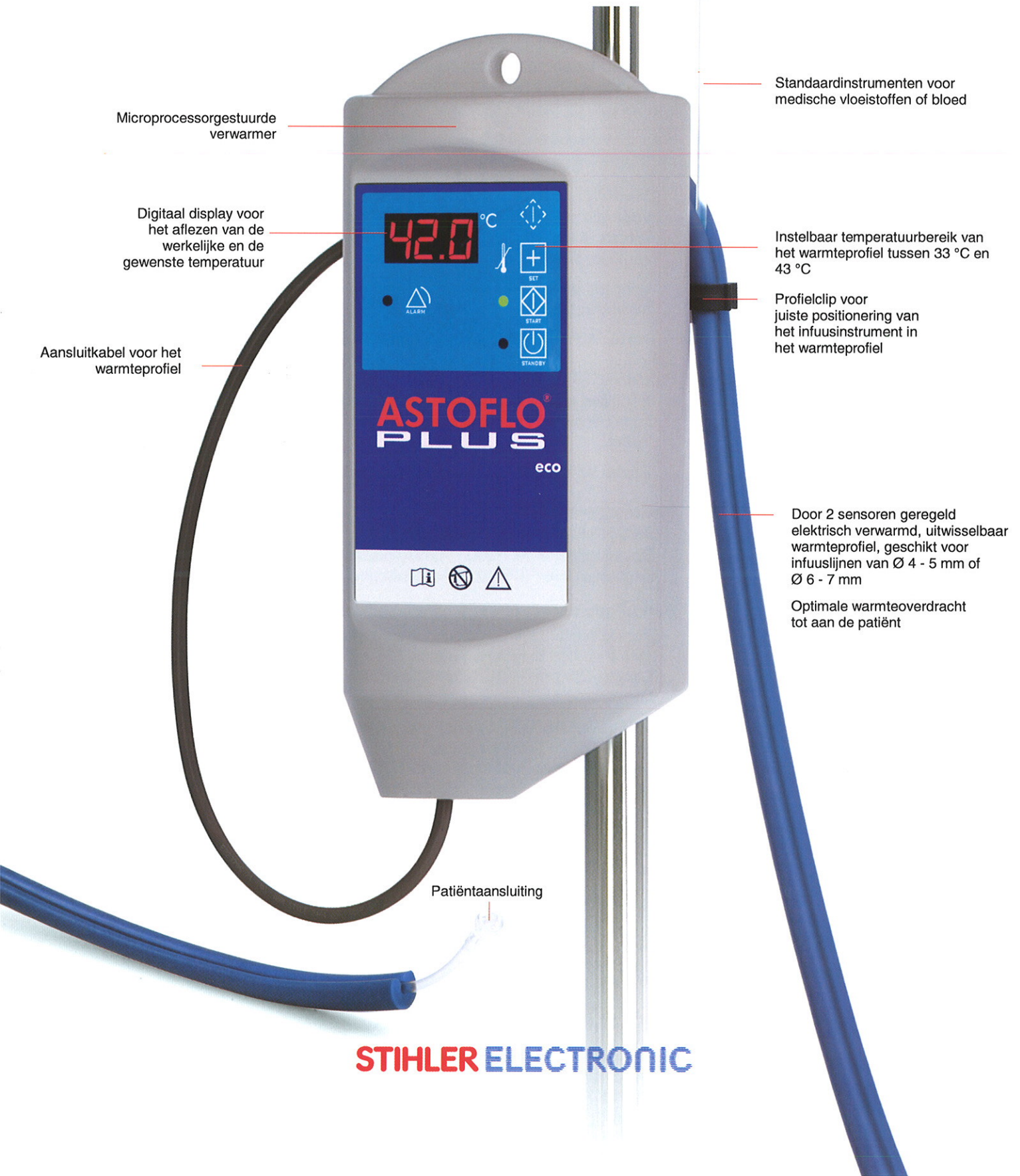

STIHLER ELECTRONIC

ASTOFLO® PLUS eco

Bloed- en infuusverwarmer

De eenvoudigste en zuinigstmethode om alle infusies en transfusies effectief te verwarmen!

- Het elektrisch verwarmde warmteprofiel met geïntegreerde temperatuursensoren garandeert de beste verwarming en hoogste veiligheid dankzij de instelbare flowregeling.
- De vloeistof wordt op weg naar de patiënt in droge passage actief verwarmd tot aan de canule bij de patiënt. Een reeds voorverwarmde oplossing wordt op deze wijze ook bij een hoge flow tot aan de patiënt optimaal op temperatuur gehouden.
- Voor de verschillende medische eisen zijn twee verschillende warmteprofielen beschikbaar.
- Profiel WP31 / WP32
 - Voor alle standaardinfusie- en bloedsystemen met een buitendiameter van ca. 4 mm, in de operatiekamer, intensive care en de verpleegafdeling.
 - Voor het verwarmen van de bloederugstroomleiding bij dialyse en hemofiltratie.
 - Profiel WP31 / WP32 is verkrijgbaar in de lengtes 180 cm en 240 cm.
- Profiel WP33 / WP34
 - Voor alle medische toepassingen als bij profiel WP31 / WP32, waarbij instrumenten gebruikt worden met een buitendiameter van ca. 6 – 7 mm.
 - Profiel WP33 / WP34 is verkrijgbaar in de lengtes 180 cm en 240 cm.
- Bestelgegevens
 - ASTOFLO PLUS ECO-verwarmer
 - Bestelnummer: AFP300 - Aansluitkabel voor het warmteprofiel 40 cm
 - Bestelnummer: AFT302 - Aansluitkabel voor het warmteprofiel 80 cm

Benodigde accessoires: 1 verwisselbaar warmteprofiel

- Profiel WP31 / WP32 (blauw) voor standaardinstrumenten met 4 - 5 mm buitendiameter
Lengte 180 cm Bestelnummer: WP31
Lengte 240 cm Bestelnummer: WP32
- Profiel WP33 / WP34 (grijs) voor instrumenten met 6 - 7 mm buitendiameter
Lengte 180 cm Bestelnummer: WP33
Lengte 240 cm Bestelnummer: WP34



Uw bevoegde
vertegenwoordiging

CLASSIFIED
C UL US
MEDICAL ELECTRICAL
EQUIPMENT
UL 60601-1 AND
CAN/CSA C22.2 601.1
75JA



STIHLER ELECTRONIC

Stihler Electronic GmbH
Julius-Hoelder-Strasse 36 · 70597 Stuttgart · Germany
Telefon +49 (0) 711-720670 · Telefax +49 (0) 711-7206757
www.stihlerelectronic.de · E-Mail: info@stihlerelectronic.de