

ASTOPAD™ ROE



HET UNIEKE VERWARMDE MATRAS, VRIJ VAN ARTEFACTEN TIJDENS RÖNTGENFOTO'S.

ASTOPAD™ ROE toegepaste onderdelen verwarmen patiënten in gebieden die gevoelig zijn voor röntgenartefacten. ASTOPAD™ ROE verwarmde matrassen zijn ontworpen voor een 100% artefactvrije positionering van de patiënt tijdens röntgentoepassingen in Cath-Labs, angiografie en andere hybride-operatiekamerruimtes. Een unieke sensorzone buiten het gebied waar de patiënt zich bevindt, wordt gebruikt om de temperatuur van de ASTOPAD™ ROE te regelen, zonder de veiligheid van de patiënt in gevaar te brengen. Visco-elastisch schuim in combinatie met het superieure koolstofvezel verwarmingselement vormt het perfecte OK-tafelmatras dat ultiem comfort en warmte voor de patiënt biedt en geschikt is voor alle routine- en noodinterventies. ASTOPAD™ is verkrijgbaar met een dikte van 4 cm en 8 cm als ROE4 en ROE8. De verwarmde matrassen zijn op maat gemaakt, zodat ze perfect passen op de meeste gangbare OK-tafels. ASTOPAD™ ROE 4 en ROE 8 worden bestuurd door de ASTOPAD™ DUO310 besturingseenheid die kan worden gemonteerd op een infuuspaal of direct op een medische rail.

PATIËNT DUURZAAM OPWARMEN.



ASTOPAD™ vereist geen wegwerpartikelen bij het gebruik en kan worden afgeveegd met een voor ziekenhuizen goedgekeurd ontsmettingsmiddel.

KENMERKEN & VOORDELEN



Veilig en betrouwbaar ontwerp met sensorzone.



Het ASTOPAD™-systeem kan samen met HF-chirurgische instrumenten worden gebruikt.




Verschillende maten beschikbaar voor alle marktrelevante OK-tafels.



Stille werking om afleiding in de operatiekamer tot een minimum te beperken.

Ontworpen om de veiligheid van de patiënt te garanderen

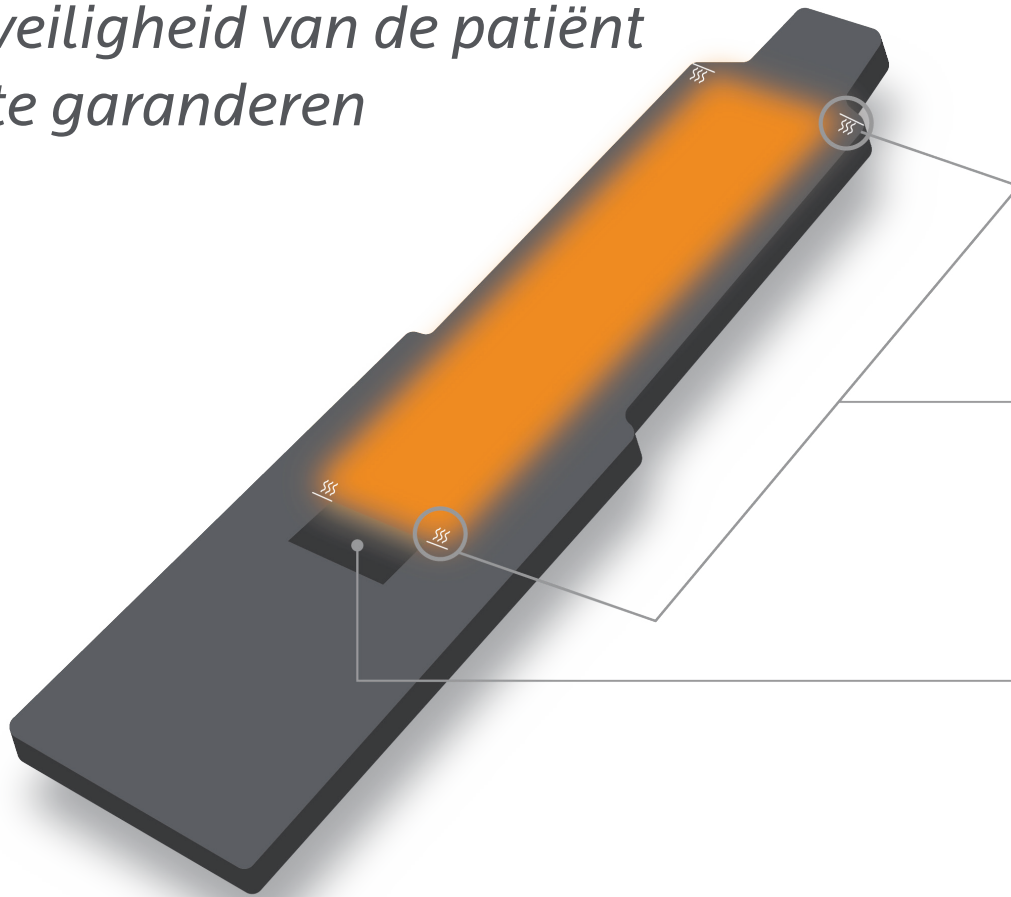

1 PATIËNTZONE:

- Decubitusprofylaxe
- Warmte geven
- Röntgentransparant en vrij van artefacten

2 SENSORZONE:

Regelt de temperatuur van het matras door de patiënt te simuleren voor volledige nauwkeurigheid en veiligheid.

BESTELINFORMATIE:

| CAT.NR. | BESCHRIJVING | SPANNING / HOEVEELHEID |
|--------------------------------------|--|---------------------------|
| RESISTIEF VERWARMINGSAPPARAAT | | |
| DUO310 | Besturingseenheid | 100 V - 240 V, 50-60 Hz |
| RESISTIEF VERWARMD MATRAS | | |
| ROE4 | ASTOPAD™ verwarmd matras - dikte 40 mm aangepaste lengte 2200-3000 mm | elk |
| ROE8 | ASTOPAD™ verwarmd matras - dikte 80 mm aangepaste lengte 2200-3000 mm | elk |

