


ASTOPAD™ ROE

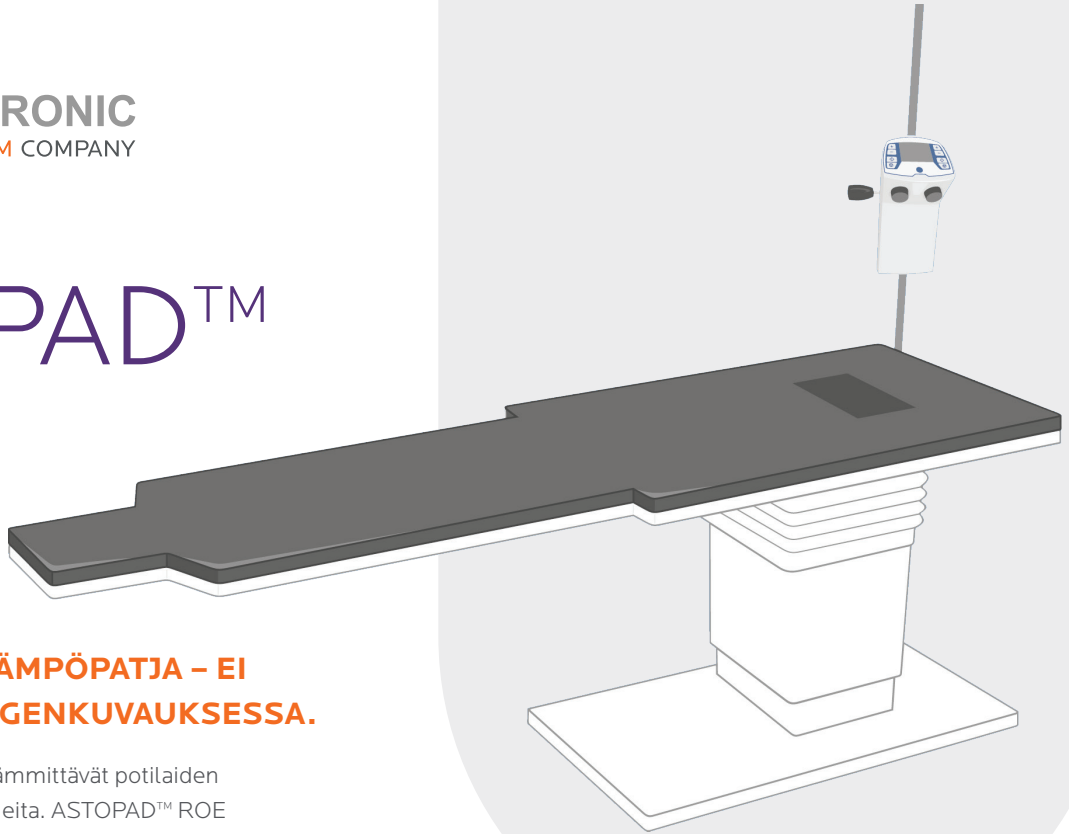

AINUTLAATUINEN LÄMPÖPATJA – EI ARTEFAKTEJA RÖNTGENKUVAUKSESSA.

ASTOPAD™ ROE -potilasosat lämmittävät potilaiden röntgenartefakteille herkkiä alueita. ASTOPAD™ ROE -lämpöpatjat on suunniteltu tuottamaan täysin artefaktiton potilaan asettelu röntgenkuvauksissa katetrilaboratorioissa, angiografiassa tai muilla hybridileikkaussalin alueilla. Potilaan asettelualueen ulkopuolella sijaitsevaa ainutlaatuista sensorivyöhykettä käytetään ASTOPAD™ ROE -patjan lämpötilan säätelyyn ja samalla potilaan turvallisuuden varmistamiseen. Viskoelastinen vaahtomuovi yhdistettynä tasokkaaseen hiilikuitulämmityselementtiin muodostavat täydellisen leikkauspöydän patjan, joka takaa parhaan mukavuuden ja lämmön potilaalle ja sopii kaikkiin rutiini- ja hätätoimenpiteisiin. ASTOPAD™-patjaa on saatavana 4 cm:n ja 8 cm:n paksuisina malleina ROE4 ja ROE8. Lämpöpatjat sopivat täydellisesti yleisimpiin leikkauspöytiin. ASTOPAD™ ROE 4- ja ROE 8 -mallia ohjataan ASTOPAD™ DUO310 -ohjausyksiköllä, joka voidaan asentaa joko tippatelineeseen tai suoraan pöydän kiskoon.

POTILAAN KESTÄVÄÄ LÄMMITYSTÄ.



ASTOPAD™-patjan käytössä ei tarvita kertakäyttötarvikkeita, ja sen voi pyyhkiä sairaalan hyväksymällä desinfiointiaineella.

OMINAISUUDET JA EDUT



Turvallinen ja luotettava muotoilu, sisältää sensorivyöhykkeen.



ASTOPAD™-järjestelmää voi käyttää suurtaajuusleikkausinstrumenttien kanssa.




Saatavana eri kokoja kaikkiin markkinoilla oleviin leikkauspöytiin.



Hiljainen toiminta minimoi häiriöt leikkaussalissa.

Suunniteltu varmistamaan potilasturvallisuus

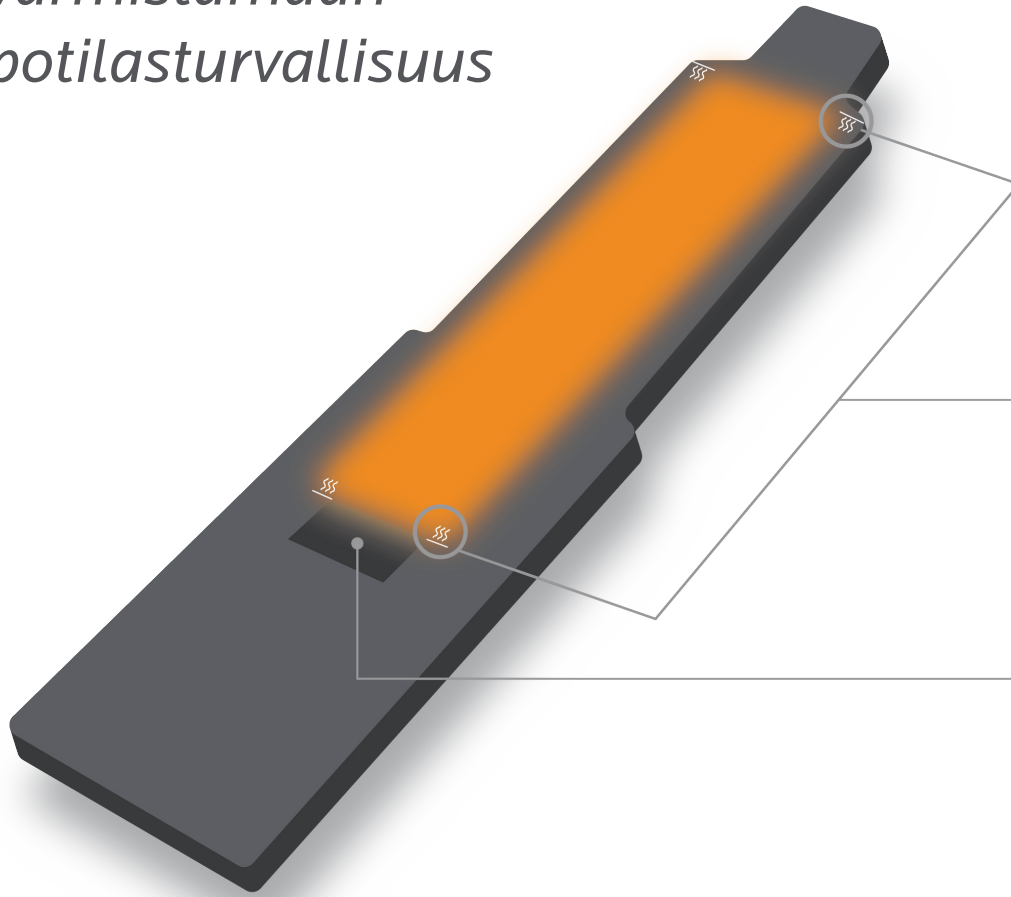

1 POTILASVYÖHYKE:

- painehaavojen ehkäisy
- lämmittää
- röntgenissä läpinäkyvä ja artefaktiton

2 SENSORIVYÖHYKE:

Säätää patjan lämpötilaa potilasta simuloimalla, mikä takaa täyden tarkkuuden ja turvallisuuden.

TILAUSTIEDOT:

LUETT.NRO	KUVAUS	JÄNNITE/MÄÄRÄ
VASTUKSELLINEN LÄMPÖLAITE		
DUO310	Ohjausyksikkö	100–240 V, 50–60 Hz
VASTUKSELLINEN LÄMPÖPATJA		
ROE4	ASTOPAD™-lämpöpatja – paksuus 40 mm mukautettava pituus – 2 200–3 000 mm	kappale
ROE8	ASTOPAD™-lämpöpatja – paksuus 80mm mukautettava pituus – 2 200–3 000 mm	kappale

