


# ASTOPAD®

## BABYVÄRMARE

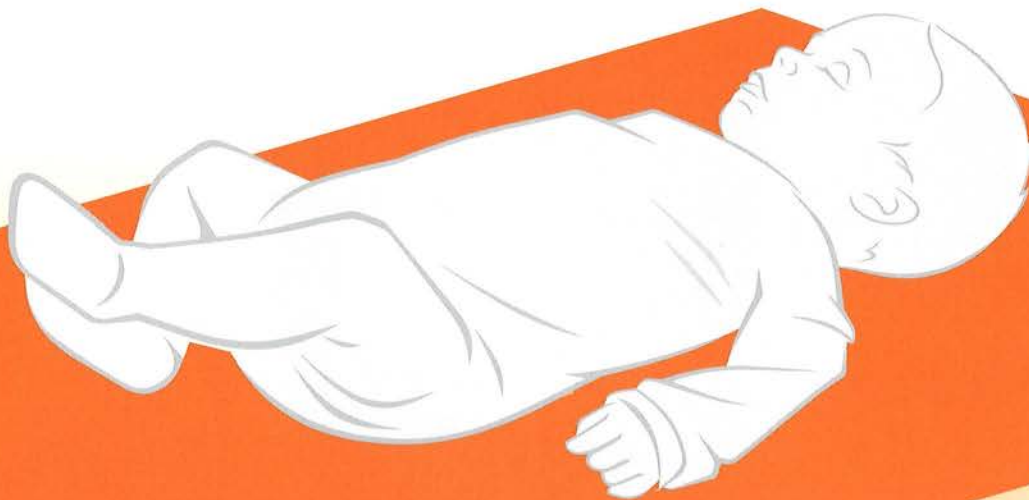

säker . mysig . ekonomisk

**STIHLER ELECTRONIC**

High quality products for the medical field

# ASTOPAD® BABYVÄRMARE

**ASTOPAD babyvärmare** ger alla för tidigt födda och nyfödda barn behaglig, skyddande värme. Extravärmen hjälper nyfödda att sova gott och utvecklas optimalt.

Tillval: Det integrerade uppladdningsbara batteriet för styrenheten ASTOPAD DUO310 är mycket kraftfullt och ger den nyfödda en elnätsberoende värmeförsörjning i alla tillämpningar.

**ASTOPAD COV070** värmetäcke gör enkelt varje babysäng till en värmesäng. Den kan användas som liggyteuppvärmning under babyn och/eller som täcke på babyn.

Med **ASTOPAD SOF7** kan en uppvärmd madrass för babysängen tillverkas direkt enligt babysängens mått.

**ASTOPAD babyvärmare** kan användas för alla möjliga tillämpningar.

I spädbarnsrummet som termiskt långtidsstöd för ett eller två spädbarn.

I förlossningsrummet vid den första värmeförsörjningen på liggytan.

För uppvärmning av en återupplivningsenhetens liggyta.

I operationssalen för att undvika perioperativ hypotermi.

Vid transport inom sjukhuset kan **ASTOPAD** fortsätta att förse babyn med värme, oberoende av elnät, tack vare det integrerade batteriet.

## 1. Spädbarnsavdelning

På spädbarnsavdelningen kan upp till två nyfödda oberoende av varandra värmas med en styrenhet. **ASTOPAD babyvärmare** är därmed en av de mest ekonomiska lösningarna när det handlar om att förse nyfödda med värme.



## 2. I operationsområdet

**ASTOPAD babyvärmare** är perfekt lämpad för användning innan, under och efter operation av spädbarn och småbarn. Värmotäckena är röntgengenomsläppliga och desinficerbara.

## 3. Undersökningsplats

Var än nyfödda undersöks – redan i förlossningssalen, vid kejsarsnittoperation eller på spädbarnsavdelningen – och kan förlora oskyddad värme, kan detta förhindras med **ASTOPAD babyvärmare**.

## 4. Återupplivningsenhet

Återupplivningsenheten, som inte är utrustad med en integrerad liggyteuppvärmning, kan mycket enkelt kompletteras med **ASTOPAD babyvärmare**.

"Kangaroo Care" – och "Rooming in" har aldrig varit så mysigt varma och bekväma. ASTOPAD DUO310 styrenhet, som tillval med fullt integrerbart, uppladdningsbart batteri.

ASTOPAD DUO310  
ASTOPAD COV070



Vid "Kangaroo Care" sveps baby'n behagligt in i det aktiva värmetäcket **ASTOPAD COV070** och kan på så sätt vara "Skin to Skin" i flera timmar utan att bli kall om ryggen.

ASTOPAD DUO310  
ASTOPAD COV070



Vid "Rooming in" och på spädbarnsavdelningen kan det aktiva värmetäcket **ASTOPAD COV070** användas under baby'n som liggyteuppvärmning och/eller på baby'n som täcke.

Komponenter

Beteckning

Användning



**ASTOPAD DUO310**  
Styrenhet

Ljudfri permanent drift 24 tim./dag, BxHxD 300x155x130 mm, vikt: max 2,5 kg, 100–240 V AC, 50–60 Hz, utgångsspänning 24 volt. Larmfunktioner för över-/undertemperatur och kabelbrott. Exakt temperaturreglering i steg om 0,5 °C från 32 °C till 39 °C. Reglering av upp till två användardelar oberoende av varandra. Fästs på infusionsstativ, sängen eller medicinsk DIN-skena.

Batteri (tillval)

Integrerat, uppladdningsbart batteri för styrenheten ASTOPAD DUO310 (tillval)



**ASTOPAD COV070**  
Värm täcke  
680 x 480 mm  
**COV40070**  
Återanvändningsskydd

Skyddsklenspänning 24 volt, flexibel och följsam, röntgenomsläpplig, värmeeffekt max. 60 watt, kolfibervärmeelement som styrs av 8 NTC-temperatursensorer, tvättbar, desinficerbar. Användning som över- eller undertäcke. Inklusive en standard-anslutnings-/förlängningskabel.



**ASTOPAD SOF7**  
Uppvärm, tryckavlastande dyna  
Längd 600–800 mm (med sakral 660–900 mm), bredd 450–600 mm, höjd 40–100 mm  
**SOF407**  
Återanvändningsskydd

Måtten anpassas individuellt – därigenom lämplig som madrass för babysängen och varje operationsbord. Finns om så önskas även tillgänglig med sakral-urklippning.

Stihler Electronic GmbH  
Julius-Hoelder-Strasse 36  
70597 Stuttgart  
Germany

Tel: +49 (0) 711 72067-0  
Fax: +49 (0) 711 72067-27

www.stihlerelectronic.de  
E-mail: info@stihlerelectronic.de



© STIHLER ELECTRONIC GMBH  
Technical modifications reserved  
Rev. 01, 02/2018

# ASTODIA®

## DIAFANOSKOP FÖR GENOMLYSNING

Diafanoskopet ASTODIA möjliggör enkel vaskulär sökning för säker punktering. ASTODIA gör det även möjligt att påvisa luft- eller vätskefyllda strukturer djupare under huden (t.ex. pneumothorax, hydrocele).

ASTODIA är särskilt lämpat för användning inom pediatriken, främst för tidigt födda och nyfödda barn. På så sätt presenteras venösa och arteriella kärl på extremiteterna mycket tydligt för punktering.

ASTODIA har en orangefärgad och en röd högeffekts-LED med reglering av ljusstyrkan. Med det orangefärgade ljuset uppnås en särskilt bra kontrast och med det röda ljuset ökar man inträngningsdjupet i vävnaden. Detta är även en fördel vid diagnos av pneumothorax eller hydrocele.

ASTODIAs perfekta tillämpning gör genomlysningen till rutinmässig tillämpning vid svåra kärlförhållanden.

Sterilt förpackade ASTODIA är även lämpligt för procedurer som applicering av centrala katetrar.



### Användardelar



DIA120



DIA130



DIA100

### Beteckning

**ASTODIA DIA100**  
komplett bestående av:

- 1 st. styrenhet DIA120
- 1 st. handstycke DIA130
- 1 st. laddare DIA140

Stihler Electronic GmbH  
Julius-Hoelder-Strasse 36  
70597 Stuttgart  
Germany

Tel: +49 (0) 711 72067-0  
Fax: +49 (0) 711 72067-57

www.stihlerelectronic.de  
E-mail: info@stihlerelectronic.de



© STIHLER ELECTRONIC GMBH  
Technical modifications reserved  
Rev. 01, 02/2018

**STIHLER ELECTRONIC**

High quality products for the medical field