


ASTOPAD™ SOF

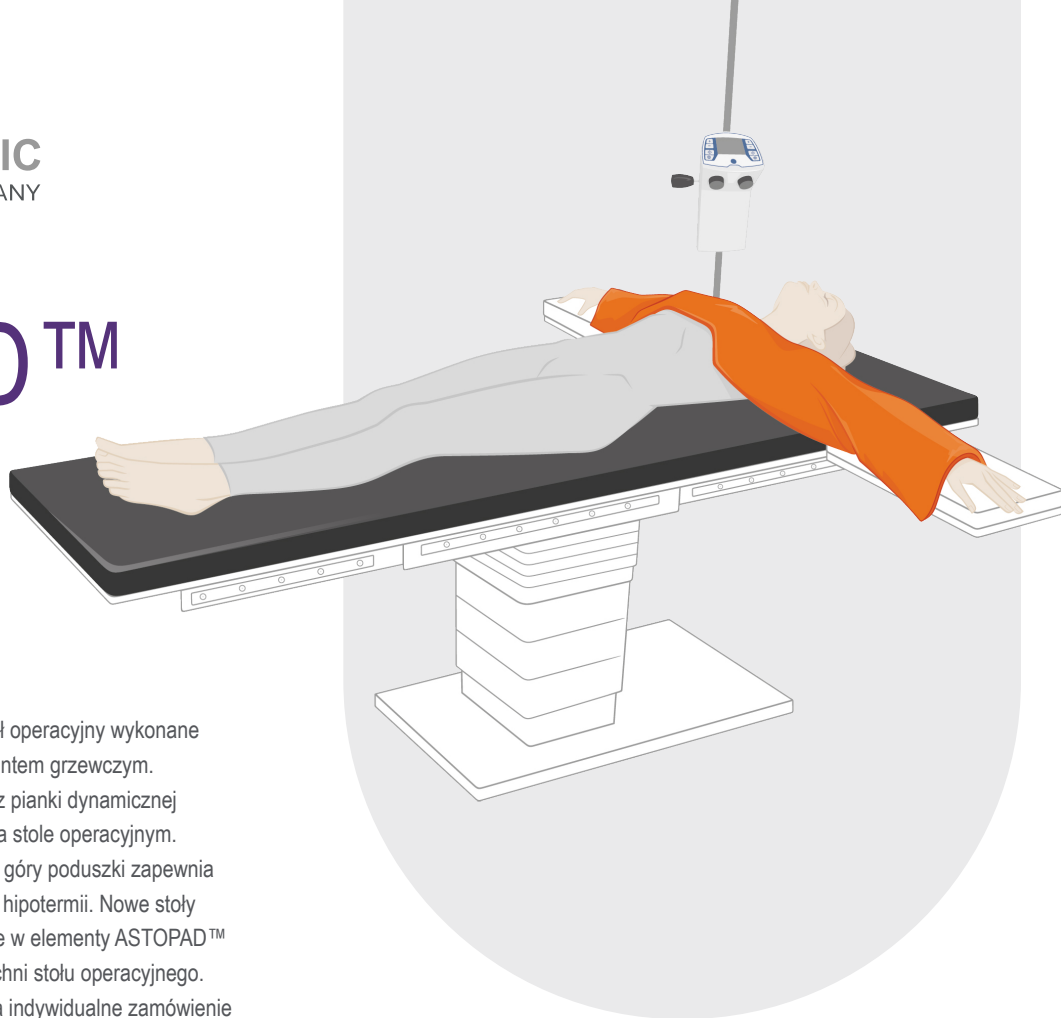

PODUSZKA GRZEWICZA

ASTOPAD™ SOF to wyjątkowe poduszki na stół operacyjny wykonane z wiskoelastycznej pianki z wbudowanym elementem grzewczym. Piankę wiskoelastyczną połączono z podstawą z pianki dynamicznej dla najlepszej profilaktyki przeciwoleżynowej na stole operacyjnym. Wbudowany element grzewczy znajdujący się u góry poduszki zapewnia pacjentom idealny poziom ciepła zapobiegający hipotermii. Nowe stoły operacyjne są często bezpośrednio wyposażone w elementy ASTOPAD™ SOF w części pod plecami lub na całej powierzchni stołu operacyjnego. Elementy ASTOPAD™ SOF są produkowane na indywidualne zamówienie według potrzeb klienta tak, by idealnie pasowały do wymiarów stołu operacyjnego.

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

ZAPEWNIANIE CIEPŁA PACJENTOWI W SPOSÓB ZRÓWNOWAŻONY.



ASTOPAD™ nie wymaga stosowania żadnych materiałów eksploatacyjnych i można go czyścić środkiem dezynfekującym zatwierdzonym do użycia w szpitalach.



Bezpieczny i niezawodny projekt z ośmioma czujnikami temperatury.



System ASTOPAD™ może być używany z narzędziami chirurgicznymi działającymi z wykorzystaniem prądów wysokiej częstotliwości (HF).



Dostępne są różne rozmiary pasujące do wszystkich dostępnych na rynku stołów operacyjnych.



Cicha praca minimalizuje rozpraszanie uwagi w sali operacyjnej.



Wykonywane na zamówienie, by pasować do wszystkich dostępnych na rynku stołów operacyjnych.



Najlepsza dostępna profilaktyka przeciwoleżynowa dzięki piance o grubości nawet 10 cm.




Dostępna jako poduszka pod plecy lub materac na całą powierzchnię stołu.



Możliwe użycie modułowe wraz z urządzeniami serii COV.

Zaprojektowano z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa pacjentom

Technology to the next degree™

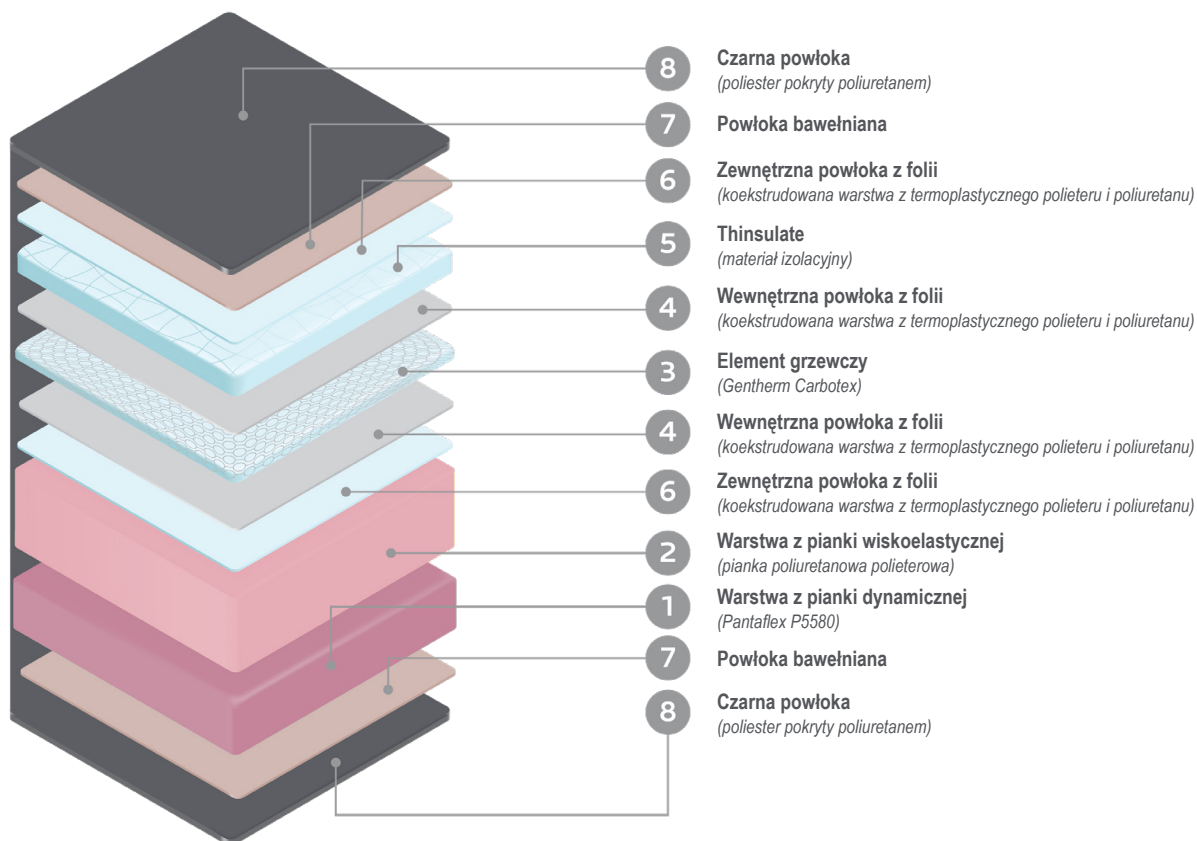

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ:

NR KAT.	OPIS	NAPIĘCIE/IŁOŚĆ
REZYSTANCYJNE PODUSZKI GRZEWCZE		
SOF7	Poduszka grzewcza ASTOPAD™ (600–800 mm x 450–600 mm x 40–100 mm) *	sztuka
SOF4	Poduszka grzewcza ASTOPAD™ (810–1300 mm x 480–600 mm x 40–100 mm) *	sztuka
SOF5	Poduszka grzewcza ASTOPAD™ (1310–1700 mm x 480–600 mm x 40–100 mm) * <small>* Podgrzewana, zmniejszająca nacisk poduszka pod plecy na stół operacyjny, antystatyczna. Wymiary są dostosowywane indywidualnie, aby produkt pasował do każdego stołu operacyjnego. Wszystkie poduszki pod plecy są opcjonalnie dostępne z otworem na część krzyżową.</small>	sztuka
SOF2	Poduszka grzewcza ASTOPAD™ (1710–2300 mm x 480–600 mm x 40–100 mm) ** <small>** Podgrzewany, zmniejszający nacisk materac na stół operacyjny, antystatyczny. Wymiary są indywidualnie dostosowywane do stołu operacyjnego.</small>	sztuka
DUO310	Jednostka sterująca	100–240 V, 50–60 Hz

